

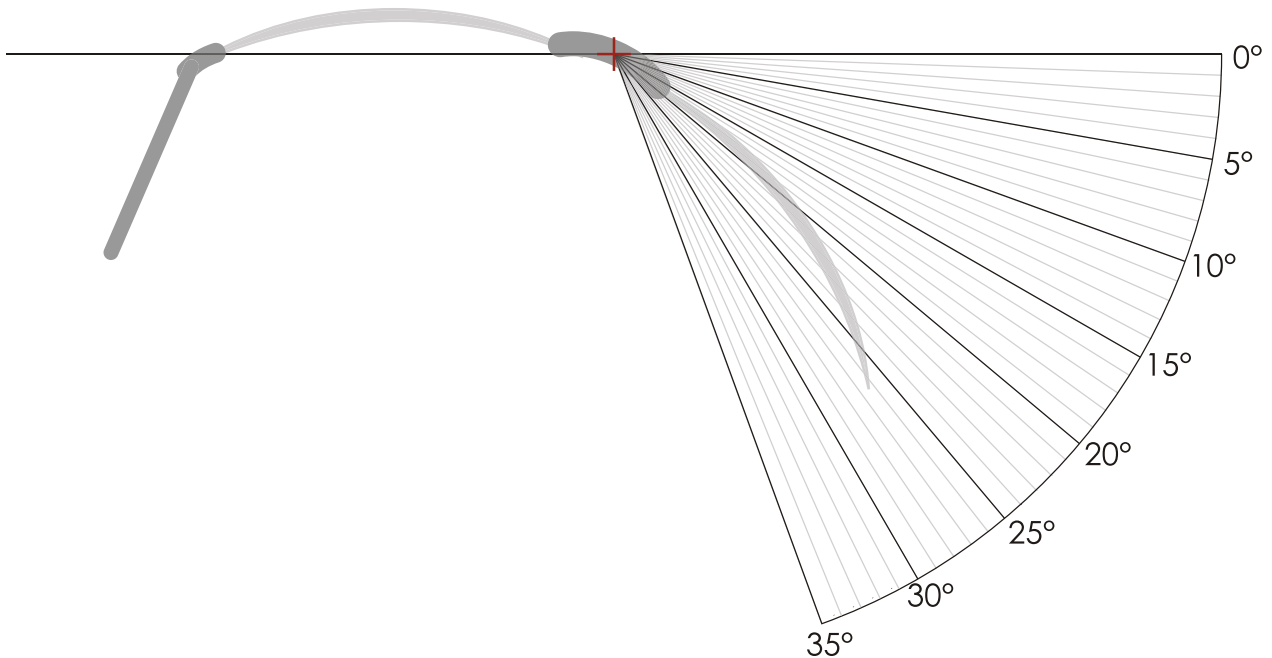
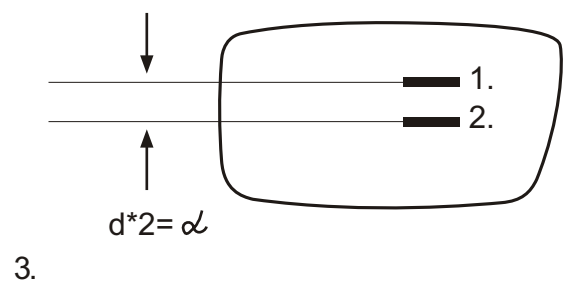


Úhel prohnutí obruby:

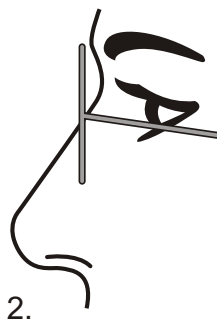

Úhel inklinace:

1. Označte pupilu v přirozeném postoji a držení hlavy.
2. Označte výšku pupily při zvednuté hlavě, kdy je rovina očnice brýlí kolmá k podlaze.
3. Rozdíl obou značek v mm vynásobený dvěma odpovídá inklináčnímu úhlu.

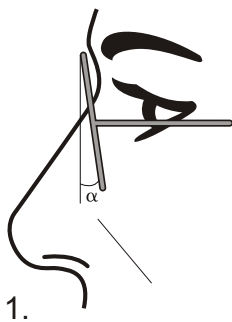

Doporučení pro úpravy:

Před měřením musí být obruba správně anatomicky přizpůsobena a posazena.
 Horizontální centrace - pupilární distanci je nutné měřit monokulárně od středu nosníku.
 Vertikální centrace - označení středů pupil při nulovém pohledu a přirozeném postoji a držení hlavy.